



6-動画を再生する（TUGテスト）

株式会社SPLYZA 7月11日（編集済み）
TUGテスト

目次

- [画面タッチによる操作](#)
- [3Dモデルの切り替え](#)
- [再生画面の表示/ボタンの説明](#)
- [TUG評価の進め方](#)

画面タッチによる操作


- 2本指でピンチアウト/ピンチイン
 - 再生画面の拡大縮小
- 1本指でスワイプ（拡大時）
 - 平行移動
- 2本指でスワイプ
 - 視点変更

3Dモデルの切り替え

SPLYZA Motion Medicalでは、画面に投影する3Dモデルを切り替えることができます。

モデルの種類は以下の3種類です。

- スティックモデル
- サーフェスモデル
- 骨格モデル

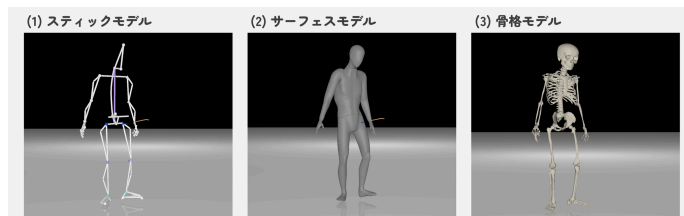

再生画面の表示/ボタンの説明

再生画面の表示は下記の通りです。

<縦画面>



<横画面>



*選択したデータの数値・グラフ（オレンジ枠）

- フルスクリーン
- 画面リセット
- XYZ軸の回転設定
- 設定
 - フレームレート設定（fps情報欠損時）
 - 解析種目
- 元動画の表示オンオフ
- 3Dモデルの切り替え
- 軌跡の設定
- 区間調整
- 共有ボタン
- 再生速度変更

- | | |
|------------------------|---------------|
| 3. 部位の色を変更 | 13. 動画時間 |
| 4. 値の表示位置を変更（フルスクリーン時） | 14. シークバー |
| 1. 画面の上下 | 15. コマ戻し |
| 2. 非表示 | 16. 再生／一時停止 |
| 5. 動画情報（対象者/解析種目） | 17. コマ送り |
| 6. 視点変更 | 18. 動画選択画面に戻る |
-

TUG評価の進め方

- | | |
|---|---|
|  1-TUGテストを撮影する |  5-動画情報を入力する |
|  2-対象者を登録する |  6-動画を再生する（TUGテスト） |
|  3-動画を選択する |  7-解析結果を見る |
|  4-動画を解析する |  8-レポートを共有・保存する |