



解析種目の切り替え

測定・解析したい運動内容に合わせて、解析種目を切り替える機能です。

解析種目について

本システムでは、TUGテストに最適化された「TUGテスト」に加えて、幅広い動作の解析に対応できる「カスタム動作」という解析種目をご利用いただけます。目的の運動に合わせて種目を切り替えてください。

- **TUGテスト**：TUGテスト（Timed Up and Go Test）の撮影動画から、起立や歩行などの各動作を自動解析する種目です。操作や結果表示はTUGテスト向けに最適化されています。
- **カスタム動作**：従来の「SPLYZA Motion」と同等の機能を利用でき、TUGテスト以外のさまざまな運動や自由な動作を解析したい場合にご利用ください。

目次

- 再生画面で変更する
- 動画選択画面で変更する

再生画面で変更する

1. 再生画面の右上にある設定ボタンをタップします。



2. 表示されたメニューから「解析種目（TUGテスト）」をタップします。



3. 動画情報画面が表示されます。画面中段に表示されている解析種目の右の「変更」をタップします。




4. 解析種目を選択します。(ex. カスタム動作)



5. 解析種目の項目が選択した解析種目に変更されていることを確認し、右上の「保存」をタップします。




6. 設定が保存され、解析種目が切り替わります。

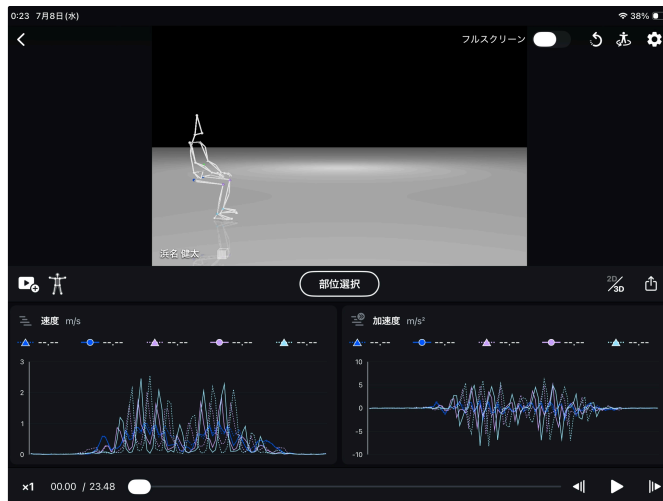


動画選択画面で変更する

1. 動画選択画面で、解析種目を変更したい動画をタップします。

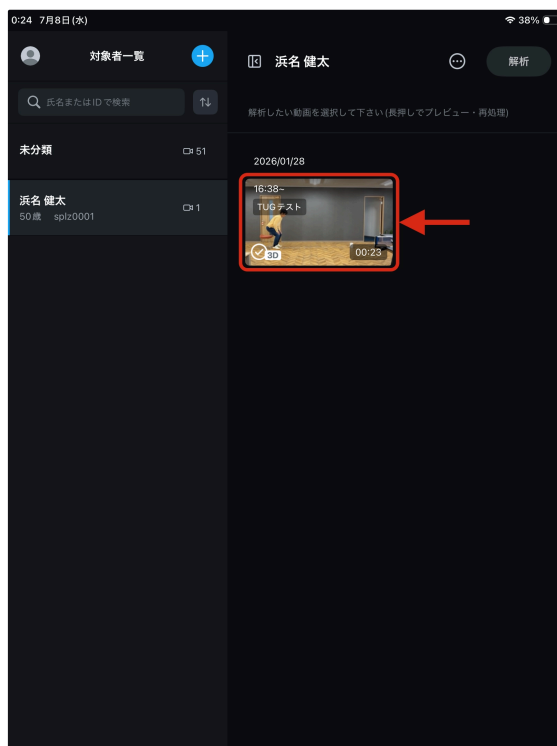

2. 画面右上の「対象者設定」をタップします。

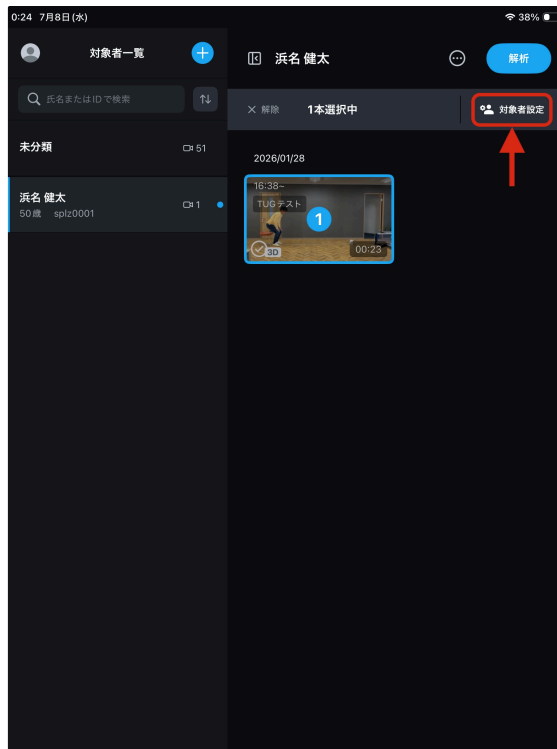

3. 動画情報画面が表示されます。画面中段に表示されている解析種目の右の「変更」をタップします。



4. 解析種目を選択します。(ex. カスタム動作)

5. 解析種目の項目を「カスタム動作」に変更し、右上の「保存」をタップ



6. 設定が保存され、解析種目が切り替わります。

